




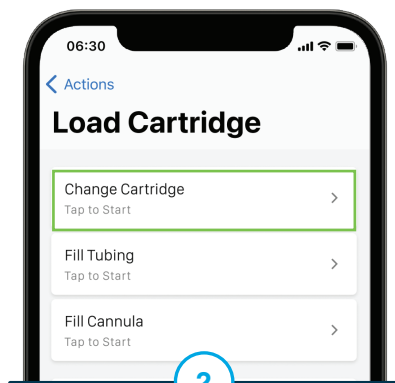


לחץ על **Change Cartridge** (החלף מחסנית) ולאחר מכן על **Yes** (כן) כדי לעצור את הזלפת האינסולין

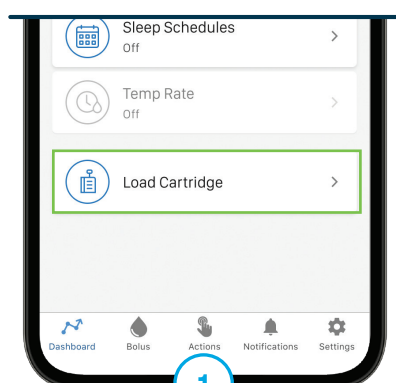


לחץ על **Actions** (פעולות) בסרגל הניווט ולאחר מכן על **Load Cartridge** (טען מחסנית)

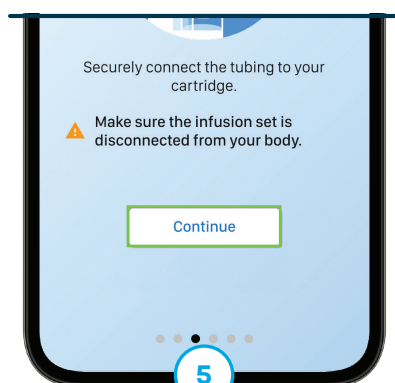


חבר את צינורית סט העירוי למחסנית ולחץ על **Continue** (המשך)

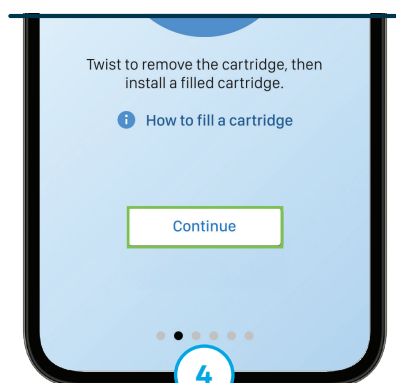

התקן את המחסנית החדשה המלאה באינסולין והקש על **Continue** (המשך).
הקש שוב על **Continue** (המשך)

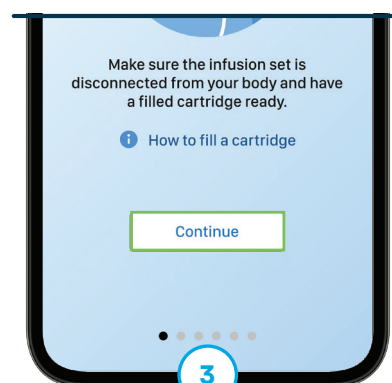


נתק את סט העירוי מהגוף ולחץ על **Continue** (המשך)

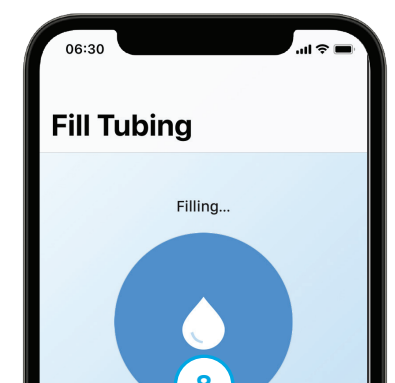


שחררו את כפתור המשאבה לאחר שיופיעו שלוש טיפות אינסולין בקצה הצינורית של סט העירוי




החזק את המשאבה והצינורית אנכית. לחץ והחזק את כפתור המשאבה

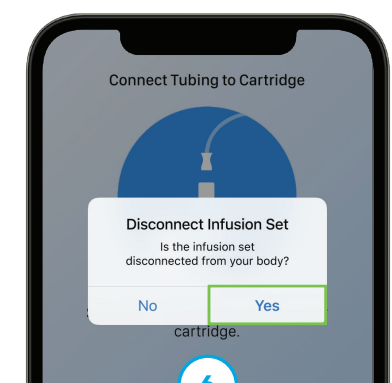


לחץ על **YES** (כן) כדי לאשר שסט העירוי מנותק מהגוף

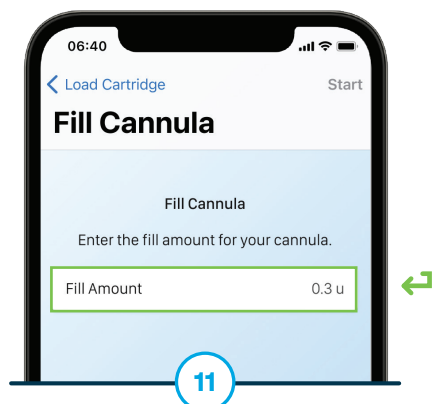


במידת הצורך, הקש על Fill Amount (כמות מילוי) כדי לערוך. אחרת, דלג לשלב הבא

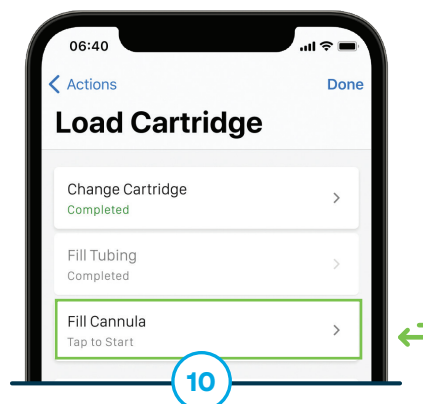


לחץ על Finish (סיום). במידת הצורך, לחץ על Fill Cannula (מלא קנולה). אחרת, דלג לשלב 13

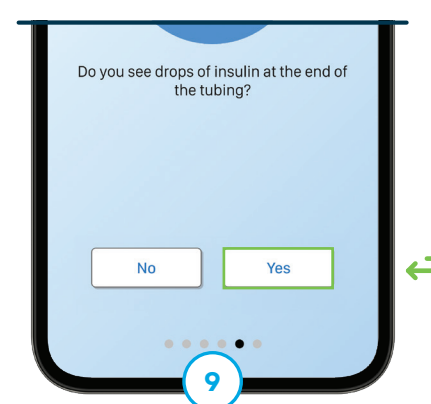


לחץ על YES (כן) וחבר מחדש את הצינורית לסט העירוי שהוחדר

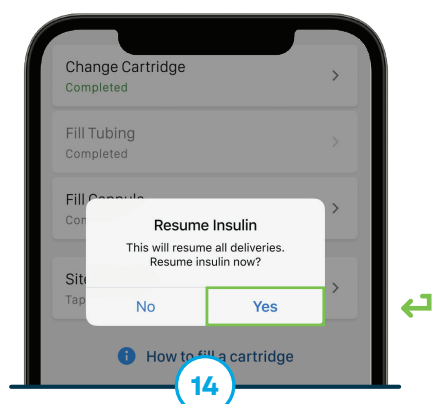

לחץ על Done (בוצע) כדי להמשיך ולאחר מכן על Yes (כן) כדי לחדש את הזלפת האינסולין

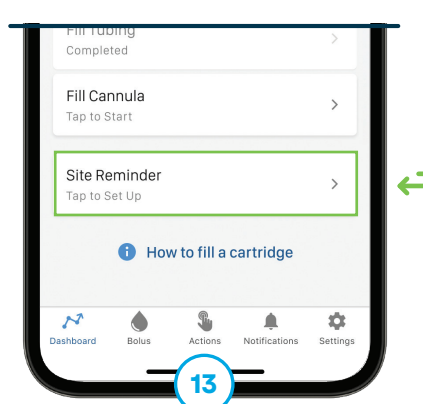

אם רוצים, לחצו על Site Reminder (תזכורת להחלפת סט העירוי). בצעו שינויים ו/או לחצו על Save (שמור). אחרת, דלגו לשלב הבא

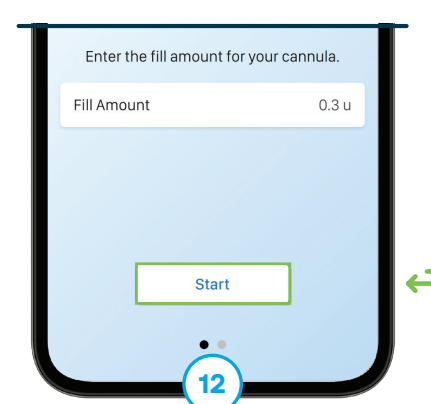

לחץ על Start (התחל) כדי למלא את הקנולה. הקש על Finish (סיום) כדי להמשיך

טיפ למשאבה: המשאבה חייבת להיות מנותקת מהגוף בעת מילוי הצינורית





הוראות אלה ניתנות ככלי עזר לאנשים שכבר מכירים את השימוש במשאבת אינסולין Tandem Diabetes Care. לא כל המסכים מוצגים. למידע מפורט יותר על תפעול משאבת האינסולין Mobi, אנא עיינו במדריך למשתמש שלה. מידע בטיחות חשוב: משאבת האינסולין Mobi עם טכנולוגיית Control-IQ+ מיועדת לניהול סוכרת מסוג 1 אצל אנשים מגיל שנתיים ומעלה.

אזהרה: אין להשתמש בטכנולוגיית Control-IQ+ אצל ילדים מתחת לגיל שנתיים עם סוכרת מסוג 1. כמו כן, אין להשתמש בה אצל חולים הזקוקים לפחות ממינון אינסולין יומי כולל של 5 יחידות שלאינסולין ליום או ששוקלים פחות מ-9 קילוגרמים, שכן אלו הערכים המינימליים הנדרשים כדי ש-Control-IQ+ יפעל בבטחה. בקרו באתר tandemdiabetes.com/safetyinfo למידע בטיחות חשוב נוסף.

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. כל הזכויות שמורות. Tandem Diabetes Care, הלוגואים של Tandem, TruSteel, t:slim X2 ו-Control-IQ+ הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Tandem Diabetes Care, Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

